


# RealGUIDE™ Software Suite **Release 5.3**

**OUT NOW**

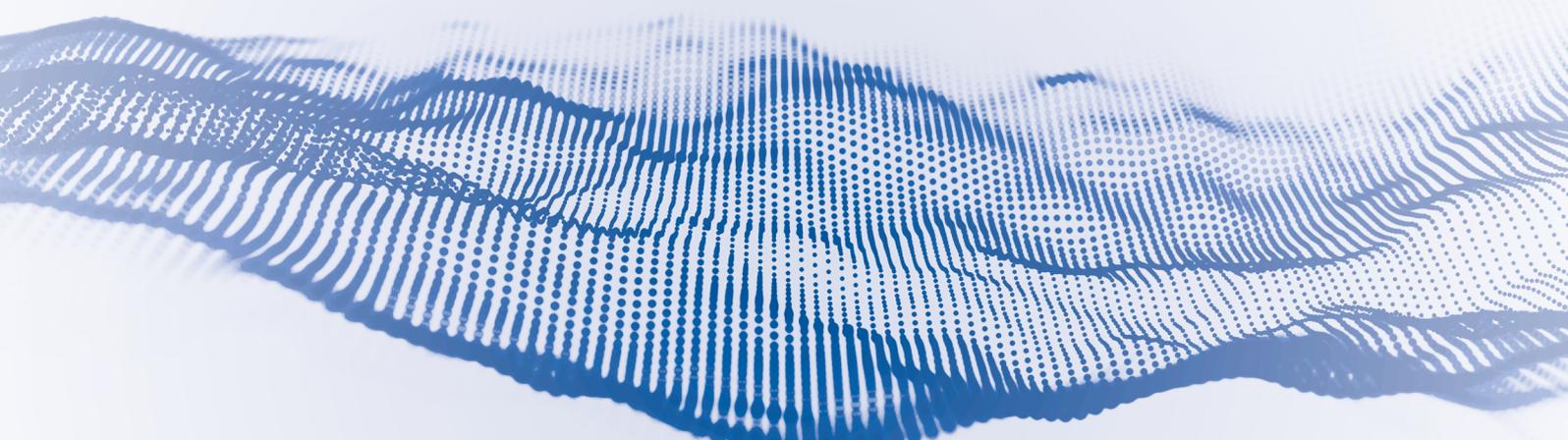


Evolviamo. Insieme a te.

# RealGUIDE™ 5.3 Release

## Nuove funzionalità Planner

### Tracciamento automatico della curva panoramica

Crea la curva panoramica con un click. Seleziona l'arcata di interesse e RealGUIDE™ ne traccerà la CPR.

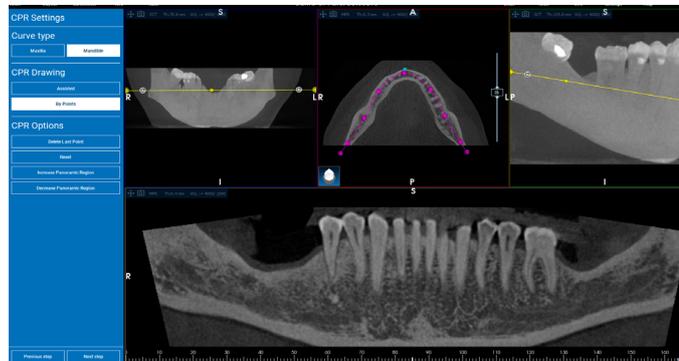


### Setup denti avanzato

Un nuovo ambiente di lavoro per il SETUP DENTI a tua disposizione a partire dal modulo PRO. Modella il tuo wax-up da libreria con pochi click in relazione all'arcata antagonista e importa le foto del tuo paziente per una progettazione estetica e funzionale.




### Segmentazione denti assistita

L'intelligenza artificiale di RealGUIDE™ può aiutarti nelle operazioni più ardue! Ora è in grado di segmentare i denti visibili nell'esame TC e di convertirli in file STL.

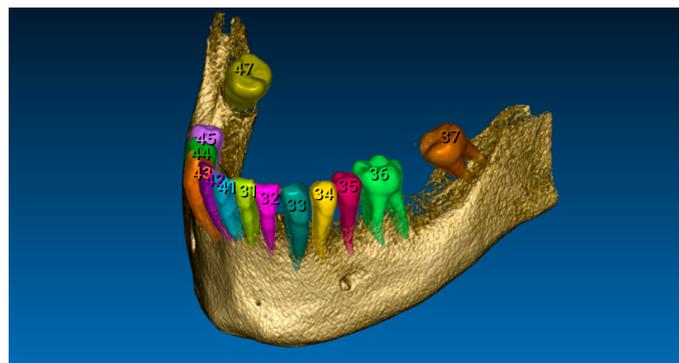

### Segmentazione corone assistita

L'Intelligenza Artificiale di RealGUIDE™ è il tuo migliore alleato. Esegui estrazioni virtuali parziali o totali dal modello di scansione STL con il minimo sforzo.

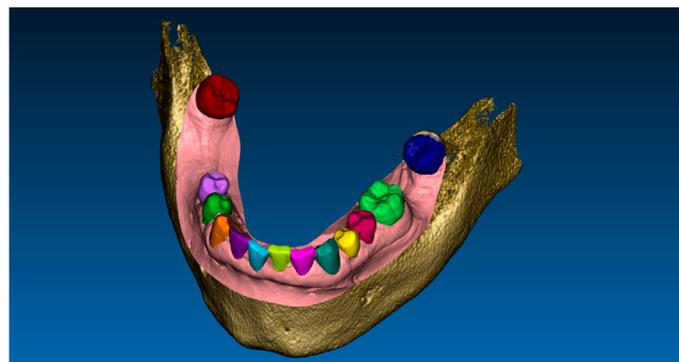


# RealGUIDE™ 5.3 Release

## Nuove funzionalità CAD


### Ottimizzazione delle librerie occlusori

Hai ora la possibilità di inserire più elementi per costruire il tuo occlusore ideale.

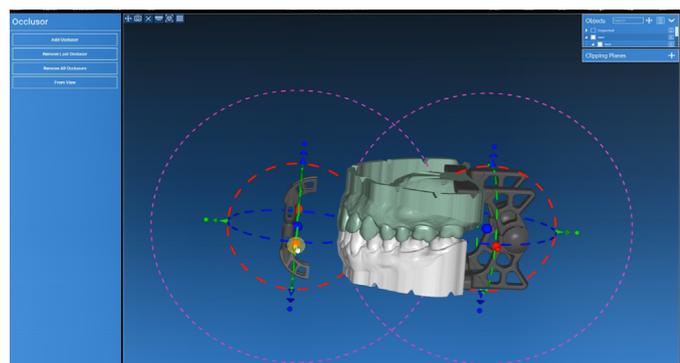


### Impostazione sorriso

Un nuovo ambiente di lavoro per impostare il sorriso. Modella il tuo mock-up e relativo modello, con pochi click in relazione all'arcata antagonista e importa le foto del tuo paziente per una progettazione sia estetica che funzionale.

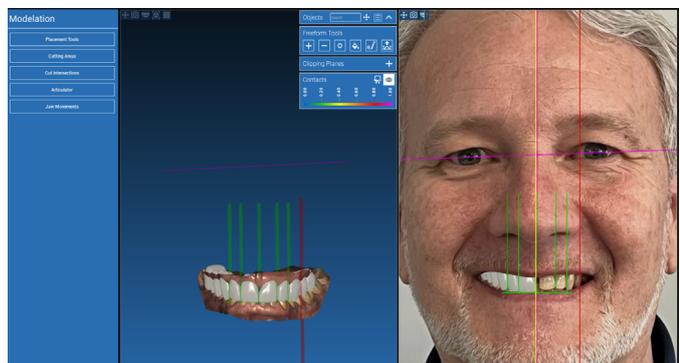


### Aggiunta flusso carico immediato semplificato

Il carico immediato su impianti ora è ancora più veloce tramite la lavorazione di semplici cilindri.

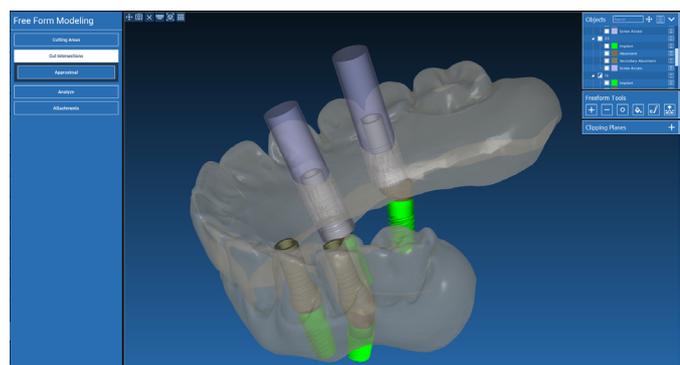

# Nuovo articolatore Stratos 300 Ivoclar


Un nuovo articolatore si aggiunge a quelli presenti nel software.

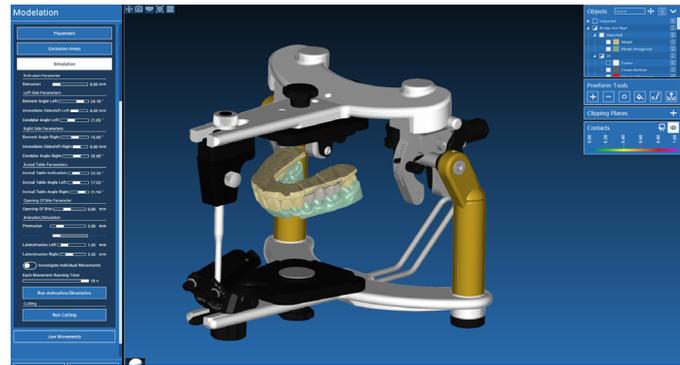

---

# Nuove regolazioni di visualizzazione

Regola la brillantezza e la traslucenza di scansioni e modellazioni. Attiva o disattiva la texture migliorando ulteriormente l'esperienza di modellazione.

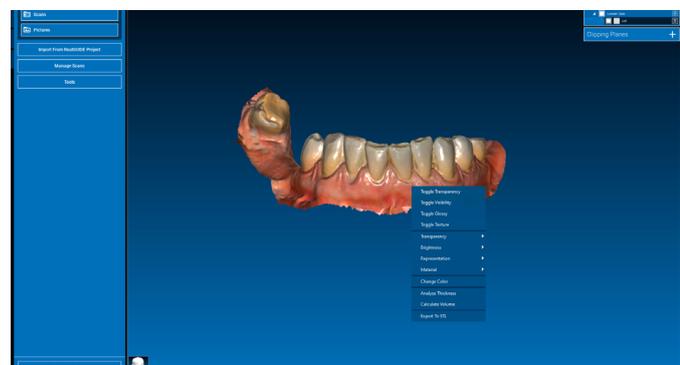

# Altre nuove funzionalità:

- Implementazione scanner Smart Optics
- Aggiunta ed eliminazione dei punti di controllo del profilo di emergenza
- Miglioramento dei metadata di produzione per Hyperdent su ricostruzioni complesse
- Miglioramento dei metadata di produzione per Hyperdent per barre su impianti
- Nuova interfaccia grafica di selezione delle ricostruzioni
- Ottimizzazione e semplificazione flusso e strumenti di posizionamento denti



3DIEMME S.r.l.  
Via Delle Baraggette 10 | 22060 Figino Serenza (CO) | Italia  
Telefono +39 031.7073353  
support@3diemme.it  
www.3diemme.it

